



# WILCOS

— DESDE 1938 —

# CATÁLOGO DE PRODUTOS

 /wilcos\_

 /wilcosacademy

 /wilcosdobrasil

 55 24 3064-1000

 [www.wilcos.com.br](http://www.wilcos.com.br)

# ÍNDICE

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| RESILAB MASTER .....                     | PÁGINA 1            |
| RESILAB GENGIVA .....                    | PÁGINA 2            |
| RESIMIX .....                            | PÁGINA 3            |
| RESILAB CAD HC   RESILAB DISC HC .....   | PÁGINA 4            |
| RESILAB PMMA .....                       | PÁGINA 5            |
| INFINITY FILL .....                      | PÁGINA 6            |
| PROVIMASTER F .....                      | PÁGINA 7            |
| MATCH 3D .....                           | PÁGINA 8            |
| MATCH CLASSIC .....                      | PÁGINA 9            |
| MATCH BOND .....                         | PÁGINA 10           |
| MASTERCOLOR .....                        | PÁGINA 11           |
| MASTERSEAL .....                         | PÁGINA 12           |
| ZIRCOMASTER .....                        | PÁGINA 13           |
| RESILAB 3D .....                         | PÁGINA 14           |
| IONOMASTER R PLUS .....                  | PÁGINA 15           |
| IONOMASTER C PLUS .....                  | PÁGINA 16           |
| MASTERROLL PLUS .....                    | PÁGINA 17           |
| ESPELHOS WILCOS .....                    | PÁGINA 18           |
| ENDO-FROST .....                         | PÁGINA 19           |
| MASTERSIL LAB E CATALISADOR .....        | PÁGINA 20           |
| FIO DE SUTURA .....                      | PÁGINA 21           |
| DISSILICATO DE LÍTIO .....               | PÁGINA 22           |
| ORTHOMASTER .....                        | PÁGINA 23           |
| MASTERCLEAN .....                        | PÁGINA 24           |
| TIRAS ODONTOLÓGICAS .....                | PÁGINA 25           |
| WENDO .....                              | PÁGINA 26           |
| INSTRUMENTAIS WILCOS .....               | PÁGINAS 27, 28 E 29 |
| VITA VMK MASTER .....                    | PÁGINA 30           |
| ESCALAS VITA .....                       | PÁGINA 31           |
| VITA MFT .....                           | PÁGINA 32           |
| VITA AKZENT PLUS .....                   | PÁGINA 33           |
| VITA AMBRIA .....                        | PÁGINA 34           |
| VITA BLOCS .....                         | PÁGINA 35           |
| VITA LUMEX AC .....                      | PÁGINA 36           |
| VITA LUMEX UNIQUE .....                  | PÁGINA 37           |
| BELLAVEST SH .....                       | PÁGINA 38           |
| BEGOSOL HE .....                         | PÁGINA 39           |
| WIRONIA LIGHT .....                      | PÁGINA 40           |
| BEGOFORM .....                           | PÁGINA 41           |
| DISCOS HORICO .....                      | PÁGINA 42           |
| PONTAS DIAMANTADAS MANI .....            | PÁGINAS 43 E 44     |
| ENDODONTIA MANI .....                    | PÁGINA 45           |
| BROCAS MASTERCUT .....                   | PÁGINAS 46 E 47     |
| BROCAS .....                             | PÁGINA 48           |
| LINHA ROEKO .....                        | PÁGINA 49           |
| MARCAÇÃO OCLUSAL, MATRIZES E LIGAS ..... | PÁGINA 50           |

## FLUXO DIGITAL

|                                                                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| MOTOR ELÉTRICO WPRO .....                                         | PÁGINA 51       |
| MOTOR DE IMPLANTE IMPLANT-X .....                                 | PÁGINA 52       |
| IMPRESSORAS 3D 2K E 4K .....                                      | PÁGINA 53       |
| PIONEXT MINI .....                                                | PÁGINA 54       |
| EQUIPAMENTOS PÓS-CURA .....                                       | PÁGINA 55       |
| ESPECTROFOTÔMETRO DIGITAL VITA EASYSHADE V / EASYSHADE LITE ..... | PÁGINA 56       |
| FORNOS VITA .....                                                 | PÁGINA 57       |
| RESINAS 3D BEGO .....                                             | PÁGINA 58       |
| RESINAS 3D WILCOS .....                                           | PÁGINA 59       |
| SCANNER SMILE 2 .....                                             | PÁGINA 60       |
| SMART VIEW GLASSES – SVG .....                                    | PÁGINA 61       |
| EQUIPAMENTOS DE PROFILAXIA .....                                  | PÁGINA 62       |
| PÓS DE PROFILAXIA .....                                           | PÁGINA 63       |
| PONTEIRAS PARA PROFILAXIA .....                                   | PÁGINAS 64 E 65 |

# SOBRE A WILCOS



A Wilcos do Brasil é uma empresa familiar com 88 anos de tradição e pioneirismo na Odontologia, sendo hoje liderada pela terceira geração. Atuando no setor desde 1938, consolidou-se como referência no fornecimento de soluções odontológicas de alta performance para clínicas, laboratórios e distribuidores em todo o país. Atualmente, é uma das poucas empresas brasileiras com operação integrada: representação de marcas internacionais, fabricação nacional e um ecossistema completo em Odontologia digital.

## VISÃO:

Ser reconhecida como a empresa brasileira mais inovadora e confiável na Odontologia, expandindo sua presença global com ética, sustentabilidade e valorização do conhecimento.

## MISSÃO:

Proporcionar excelência em soluções odontológicas por meio da inovação tecnológica, conhecimento técnico e compromisso com a saúde, contribuindo para a evolução da Odontologia no Brasil e no mundo.

## COMPROMISSOS:

Com a ciência e pesquisa, apoiando estudos clínicos e científicos há mais de 40 anos;

- Com a formação e capacitação contínua de profissionais de todo Brasil por meio da **Wilcos Academy**, com sede em São Paulo;
- Com a Saúde, oferecendo produtos seguros, eficazes e alinhados com os avanços globais da Odontologia;
- Com a inovação, investindo continuamente em soluções digitais, novos materiais e tecnologias disruptivas.

## WILCOS ACADEMY

Localizada em São Paulo, a Wilcos Academy é um centro de treinamento e atualização voltado para dentistas, protéticos, distribuidores e profissionais da saúde. Oferece workshops, cursos hands-on, imersões digitais e certificações em parceria com universidades e entidades de classe.

## REPRESENTAÇÃO OFICIAL DE MARCAS INTERNACIONAIS

A Wilcos representa, com exclusividade no Brasil, importantes marcas globais como VITA (há mais de 40 anos de parceria), BEGO (há mais de 25 anos de parceria), Horico (há mais de 70 anos de parceria), Meisinger (há mais de 70 anos de parceria), Mani, Coltene, Mesa, Creality, DTU, Rogin, Woodpecker, Dochem, GMR, Hahnenkratt, Parkell, entre outras marcas consagradas.

## EXPANSÃO DA ÁREA DE FABRICAÇÃO E PRODUÇÃO:

Nos últimos 05 anos, a Wilcos aumentou o time de R&D e novas áreas de produção. Possuímos laboratório modelo de gestão e qualidade no desenvolvimento e controle dos produtos fabricados.

## RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA LABORATÓRIOS



### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Resilab Master é uma resina de laboratório fotopolimerizável altamente mimética, que traz características estéticas e funcionais em perfeito equilíbrio, permitindo reproduzir com perfeição a anatomia original dos dentes. Primeira resina nacional totalmente desenvolvida nos padrões da escala de cores VITA Classical. Mais 3 cores bleached 0m1, 0m2 e 0m3.

### INDICAÇÕES:

Resilab Master é indicada para a confecção de coroas e pontes anteriores e posteriores aplicada sobre estrutura metálica, inlays, onlays e facetas laminadas.

### APRESENTAÇÃO COMERCIAL:

Dentina: seringa de 4g  
Esmalte: seringa de 4g  
Translúcido: seringa de 4g  
Opaco: seringa de 1,2g  
Kit com 7 seringas e 1 frasco de 5ml de Resimix.

**RESILAB  
MASTER**

## RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA LABORATÓRIOS



### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A Resilab Gengiva é uma resina fotopolimerizável de uso laboratorial, desenvolvida para a confecção e caracterização estética de gengiva artificial em trabalhos protéticos. Disponível nas cores G1, G2, G3 e G4, permite a seleção da cor mais adequada às diferentes necessidades clínicas e estéticas.

### INDICAÇÕES:

Indicada para a confecção, reprodução e caracterização estética de gengiva artificial em próteses odontológicas e demais trabalhos protéticos confeccionados em laboratório, permitindo a harmonização das áreas gengivais por meio de diferentes tonalidades.

### APRESENTAÇÃO COMERCIAL:

Seringa de 4 g, nas cores G1, G2, G3 e G4, e Resilab Gengiva Flow em seringa de 1,2 g.

# RESILAB

## GENGIVA

## LIQUIDO PARA MODELAR RESILAB



### DESCRIÇÃO E INDICAÇÃO DO PRODUTO

Fluido de Modelagem para Resilab  
Indicado para auxiliar na modelagem e reativação da camada de dispersão de materiais fotopolimerizáveis utilizados em restaurações estéticas.

### APRESENTAÇÃO COMERCIAL:

Frasco de 5 ml.

**RESIMIX**  
MASTER



## BLOCOS E DISCOS DE RESINA HÍBRIDA COM CARGA CERÂMICA PARA CAD/CAM



### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Resilab CAD HC e Resilab Disc HC são materiais restauradores híbridos com carga cerâmica, desenvolvidos para sistemas CAD/CAM. Combinam resistência, resiliência e excelente usinabilidade, proporcionando precisão de adaptação, bom acabamento e resultados estéticos com aparência natural.

### INDICAÇÕES:

Indicados para a fabricação de restaurações indiretas por sistemas CAD/CAM, como coroas unitárias, inlays, onlays, overlays e facetas, proporcionando precisão de usinagem, adaptação marginal e qualidade superficial.

### APRESENTAÇÃO COMERCIAL:


**Resilab CAD HC:** blocos CAD/CAM, caixa com 5 unidades, disponíveis nos tamanhos C-12, C-14, C14-14, C-16, C-40 e C-65.

**Resilab Disc HC:** discos CAD/CAM de 95 e 98 mm, caixa com 1 unidade, disponíveis nas espessuras de 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 25 mm.

Disponíveis nas translucidezes HT, MT e LT, em tonalidades VITA Classical, Bleach e Clear.

# RESILABCAD

## PMMA MULTICAMADAS PARA SISTEMAS CAD/CAM

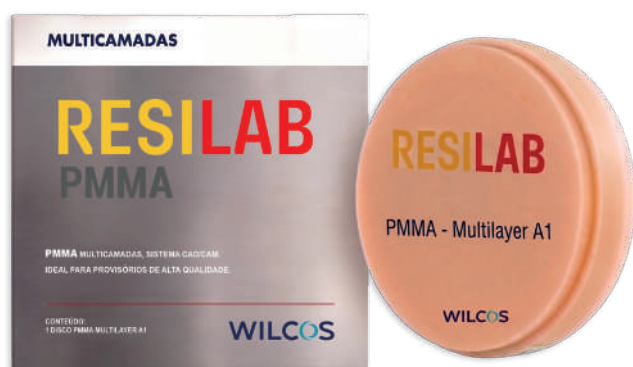

**RESILAB**  
PMMA

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

RESILAB PMMA é um material de alta pureza, homogêneo e de baixa porosidade, desenvolvido para usinagem em sistemas CAD/CAM. Sua tecnologia de nove camadas proporciona transição natural de cor, translucidez e fluorescência, sem linhas de demarcação, além de excelente polimento e acabamento superficial.

### INDICAÇÕES:

Indicado para a confecção de coroas e pontes provisórias, reabilitações provisórias de arco completo, bases para próteses removíveis, placas oclusais, mock-ups, provas de adaptação, guias cirúrgicos e outros dispositivos odontológicos processados por sistemas CAD/CAM.

### APRESENTAÇÃO COMERCIAL:

Discos com diâmetros de 95 e 98 mm;  
Espessuras de 12 a 30 mm;  
Blocos com suporte em diferentes formatos;  
Cores correspondentes à escala VITA;  
Tonalidades Bleach BL1, BL2, BL3 e BL4;  
Opção transparente (Clear).

## RESINA NANOHÍBRIDA COM EXCELENTE POLIMENTO E BRILHO



### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

INFINITY FILL é uma resina de excelente estética e funcionalidade, de composição híbrida, com carga nanoparticulada, fotopolimerizável, radiopaca e de fácil aplicação, desenvolvida para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores, de uso universal.

### INDICAÇÕES:


É indicada para técnicas de reconstruções diretas, desde a classificação de Black até a Classe V, além de correções estéticas e restaurações semidiretas, incluindo inlays, onlays e facetas.

### APRESENTAÇÃO COMERCIAL:

Blisters com seringa de 4g.

# *Infinity Fill*

## RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA OBTURAÇÕES TEMPORÁRIAS

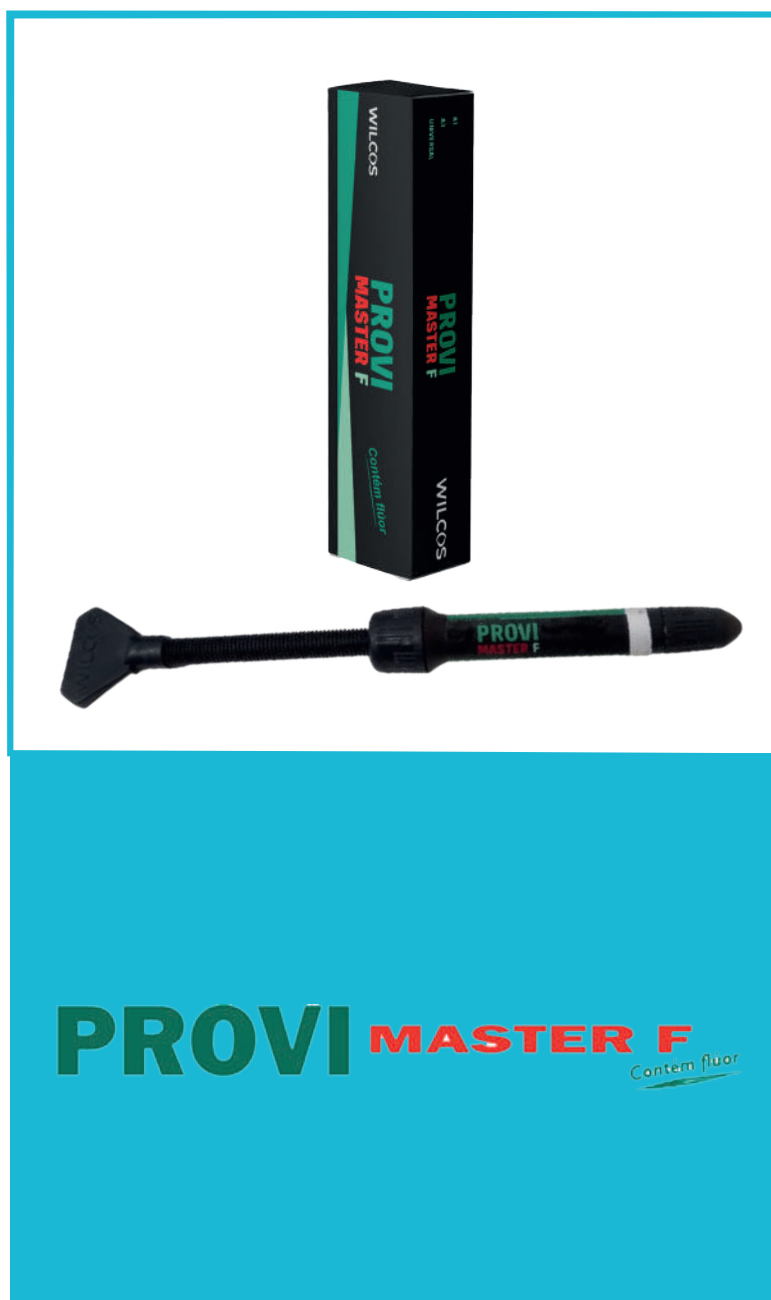

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

PROVIMASTER F é um material obturador provisório radiopaco com liberação de fluor, utilizado em procedimentos que exigem a proteção do dente antes da restauração definitiva.

PROVIMASTER F oferece resistência adequada para suportar temporariamente o desgaste causado pela mastigação, além de garantir uma fácil remoção, não sendo necessário um tratamento final da cavidade dental para a adaptação da prótese definitiva.

### INDICAÇÕES:

É indicado em técnicas de inlays/onlays, coroas, pontes, reembasamento de provisórios, selamento de provisórios em Endodontia e em componentes de Implantodontia.

### APRESENTAÇÃO COMERCIAL:

Bliester com seringa de 3g nas cores A1, A3, e U (universal).

## RESINA DIRETA NANOHÍBRIDA COM CARGA DE ZIRCÔNIA

SISTEMA VITA 3D MASTER



### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Resina nanohíbrida indicada para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores.

### INDICAÇÕES:

Para reconstruções diretas do esmalte e dentinas em dentes naturais em todas as classes de restaurações, na técnica para inlays/onlays, coroas, table tops e estabilização de dentes anteriores e posteriores.

### APRESENTAÇÃO COMERCIAL:

Dentina S: seringa de 4 g (variações D1, D2)  
Esmalte: seringa de 4 g (variações 1M1, 1M2, 2M2, 3M2)  
Incisal: seringa de 4 g (Match Clear)  
Adesivo: frasco de 5 ml (Match Bond U)

**Kit com 7 seringas e 1 frasco de adesivo Match Bond U.**

RESINAS **MATCH  
3D**

## RESINA DIRETA NANOHÍBRIDA COM CARGA DE ZIRCÔNIA

SISTEMA VITA CLASSICAL



### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Resina nanohíbrida indicada para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores.

### INDICAÇÕES:

Para reconstruções diretas do esmalte e dentinas em dentes permanentes e tecidos para restaurações de todas as classes I, II, III, IV, V e VI em correções estéticas, em facetas laminadas, na técnica para inlays/onlays, coroas, table tops e estabilização de dentes anteriores e posteriores.

### APRESENTAÇÃO COMERCIAL:

Esmalte: seringa de 4 g (variações A1, A2, A3, B1)

Dentina S: seringa de 4 g (variações D1, D2)

Incisal: seringa de 4 g (Match Clear)

Adesivo: frasco de 5 ml (MatchBond U).

**Kit com 7 seringas e 1 frasco de adesivo Match Bond U.**

RESINAS **MATCH CLASSIC**

## ADESIVO PARA RESINAS FOTOPOLIMERIZÁVEIS



ADESIVO **MATCH  
BOND**

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

MATCH BOND Adesivo Universal, livre de álcool e acetona, é indicado para aplicação em esmalte e dentina após o condicionamento ácido. Os materiais polimerizam (endurecem) com o uso de luz halógena ou LED.

### INDICAÇÕES:

Os adesivos Match Bond são utilizados em conjunto com resinas fotopolimerizáveis para a reconstrução direta de esmalte e dentina em dentes permanentes e para restaurações de todas as Classes I, II, III, IV, V e VI em correções estéticas, facetas laminadas, técnicas de inlay/onlay, coroas, table tops e estabilização de dentes anteriores e posteriores.

### APRESENTAÇÃO COMERCIAL:

Frasco com 5 ml de MATCH BOND U – Adesivo Universal.

Frasco com 5 ml de MATCH BOND ED – Adesivo para Dentina.

## KIT DE PIGMENTOS DE RESINA FLOW PARA CARACTERIZAÇÃO DE DENTES EM RESINA.



### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Master Color é uma resina composta fotopolimerizável de alto desempenho desenvolvida para a caracterização extrínseca de estruturas dentárias. Com ampla variedade de pigmentos, permite um acabamento natural e estético para restaurações e próteses dentárias.

### INDICAÇÕES:

Indicado para a caracterização de:  
Dentes de resina composta (cerômero).  
Próteses de resina impressas em 3D.  
Dentes acrílicos e gengiva artificial.  
Recomendado para inlays, onlays, facetas e próteses de resina.

### APRESENTAÇÃO COMERCIAL:

**Kit de Caracterização de Resina Composta:**  
11 (onze) seringas de 1,2g e 1 (um) Glaze de 15ml.

**Cores:** Base, Cinza, Violeta, Azul, Caramelo, Branco, Preto, Mostarda, Rosa, Vermelho, Amarelo.

**Kit para Caracterização de Gengiva:**  
07 (seis) seringas de 1,2g e 1 (um) Glaze de 15ml.

**Cores:** Rosa Claro, Rosa Marrom, Rosa Médio, Rosa Preta, Rosa Vermelho, Rosa claro e Base.

Também disponível em avulsos.

The logo features the words "MASTER" and "COLOR" in a bold, sans-serif font. "MASTER" is in black and "COLOR" is in a vibrant blue. The text is centered within a circular graphic composed of multiple overlapping, semi-transparent rings in various colors including red, orange, yellow, green, and blue, creating a dynamic, multi-colored effect.

## GLAZE FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA RESINAS DENTÁRIAS



### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

MasterSeal é um glaze fotopolimerizável inovador, desenvolvido para conferir alto brilho, proteção e durabilidade às restaurações. Sua fórmula **3 em 1** é indicada para resinas acrílicas, impressas em 3D e cerômeros, promovendo acabamento estético superior e selamento eficaz da superfície.

### INDICAÇÕES:

Trabalhos de próteses totais ou parciais.  
Revestimento de restaurações acrílicas e peças impressas em 3D.  
Selamento da superfície, prevenindo desgaste e acúmulo de placa bacteriana.  
Obtenção brilho duradouro, sem necessidade de polimento manual intenso.

### APRESENTAÇÃO COMERCIAL:

Frasco com líquido de 15ml.


# MasterSeal

## DISCOS DE ZIRCÔNIA MULTICAMADAS PARA CAD/CAM



### **ZIRCOMASTER 4D**

Disco de zircônia multicamadas que combina resistência e translucidez progressivas. Seu gradiente natural de cor proporciona equilíbrio entre desempenho funcional e estética, sendo indicado para coroas, pontes, infraestruturas protéticas e outras restaurações produzidas em sistemas CAD/CAM. Disponível nas cores A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, BL1, BL2, BL3 e BL4.

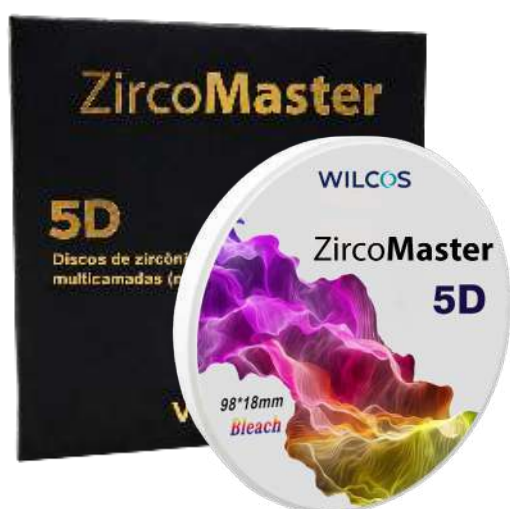

### **ZIRCOMASTER 5D**

Disco de zircônia multicamadas com maior translucidez e elevada naturalidade óptica. Reproduz suavemente as transições entre as regiões cervical, dentina e incisal, sendo especialmente indicado para coroas, pontes e restaurações com alta exigência estética. Disponível nas cores A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, BL1, BL2, BL3 e BL4.

## RESINAS PARA IMPRESSÃO 3D



### RESILAB 3D PREMIUM MODELO: CORES SKIN, GRAY, WHITE E YELLOW

A Resilab 3D Premium modelo é perfeita para criar modelos da boca do paciente para executar o trabalho de restauração ou prótese. A resina cria modelos altamente resistentes em 3 cores: Skin (pele), Gray (cinza), White (branco). ou Yellow (amarelo). Disponível em embalagens de 1Kg.



### RESILAB 3D CLEAR: PARA PLACAS E GUIAS

Resina de material translúcido e com ótima resistência. É indicada para confecção de placas para bruxismo e placas miorelaxantes. Disponível em embalagens de 250G e 500g.



### RESILAB 3D GENGIVA: PARA SIMULAÇÃO DE GENGIVA

Resina flexível com coloração rosa é indicada para fazer a simulação da gengiva em modelos de prótese dentária. Não deve ser utilizada em contato com a boca. Disponível em embalagens de 250G e 500g.



### RESILAB 3D CAST PREMIUM: PARA FUNDIÇÃO E INJEÇÃO

A Resilab 3D Cast pode ser usada para fundição de ligas metálicas e injeção de cerâmica. Devido à sua alta dissolução e resistência traz melhores resultados e fidelidade na fundição. Disponível em embalagens de 500g.



### RESILAB 3D CAST WAX: RESINA CALCINÁVEL COM CARGA DE CERA

Resina calcinável na cor azul com carga de cera para injeção. A cera permite maior fluidez para transição em cerâmica injetável. Sua composição confere às impressões uma textura suave e superfície lisa. Quando queimadas, não deixam resíduos, criando PPR ou dentes em metal altamente fiéis. Disponível em embalagens de 250mg e 500mg.



### RESILAB 3D TEMPORÁRIA NA CORES 0M2(BL2)/A1/A2/A3/B1: PARA RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS

Resina para impressão 3D de coroas, inlays, onlays e facetas provisórias. A resina é biocompatível e aprovada pela ANVISA. Disponível em embalagens de 250mg e 500mg.

# RESILAB 3D

## CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO E FORRAMENTO



### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Ionmaster R Plus é um cimento de ionômero de vidro bicomponente e radiopaco usado em tratamentos Odontológicos para restauração dos dentes. O produto é biocompatível.

### INDICAÇÕES:

Restaurações de dentes decíduos, incluindo a classe I; Reparo das erosões da região cervical e restaurações classe V; Restaurações da classe III e casos selecionados da classe I; Confecção de núcleos para coroas.

### APRESENTAÇÃO COMERCIAL

Frasco com 10g de pó nas cores A2 e A3  
Frasco com 10ml de líquido nas cores A2 e A3.

# IONOMASTER R PLUS

## CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO PARA CIMENTAÇÃO DE PRÓTESES E BANDAS ORTODÔNTICAS



### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Ionomaster C Plus é um cimento de ionômero de vidro bicomponente usado em tratamentos odontológicos para a cimentação de coroas, inlays, bandas ortodônticas e preenchimentos de restaurações de classes III e IV. O produto é altamente biocompatível e proporciona um ótimo selamento marginal (tipo I: revestimento e reparo).

### INDICAÇÕES:

Indicado para cimentação de próteses e bandas ortodônticas.

### APRESENTAÇÃO COMERCIAL

Frasco com 15g de pó.

Frasco com 12ml de líquido.

**IONOMASTER**  
**C PLUS**

## ROLETES DE ALGODÃO COM ALTA ABSORÇÃO



### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O MasterRoll é um rolete de algodão, livre de cloro e com alta capacidade de absorção de líquidos e saliva.

### INDICAÇÕES:

Indicado para uso no dia a dia clínico.

### APRESENTAÇÃO COMERCIAL:

Pacotes com 500 unidades de roletes de algodão nº 1 e nº 2.

# MASTERROLL PLUS

## LINHA DE ESPELHOS PREMIUM WILCOS



### COMFORT PLUS

Espelho front surface (primeiro plano).  
Reflexão clara e brilhante em cores naturais, proporcionando conforto para os olhos e ajudando a evitar fadiga durante o trabalho.  
Fácil de limpar devido à cobertura antiaderente.



### COMFORT PLUS (com aumento)

Espelho front surface (primeiro plano).  
Com aumento, para situações que requerem maior visibilidade.  
Vidro antiaderente de alta resistência na desinfecção e esterilização.



### COMFORT PLUS (Economy)

Espelho standart  
Alta qualidade de imagem com revestimento triplo de prata pura.  
selado com película protetora especial.



### MEGA LUX

Espelho front surface (primeiro plano).  
Peca única, sem soldas, evitando a retenção de resíduos e devido a sua ergonomia oferecendo mais conforto e biossegurança.



### RELAX PLUS

Espelho front surface (primeiro plano) em fibra de vidro.  
Revestido com Ródio, torna-se excelente refletor de luz e imune a ácidos.  
Autoclavável e resistente a produtos químicos e alterações de cor.  
CARTELA COM 1 E 2 DISPONIVEL NAS CORES CINZA, AZUL, BRANCO E ROSA.



### COMFORT HD ( high definition)

Espelho front surface (primeiro plano).  
Projeção de imagem com alta definição.  
Vidro antiaderente de alta resistência na desinfecção e esterilização.



A maioria dos espelhos Wilcos é autoclavável e revestida com mineral ródio (mais caro que o ouro).  
O ródio é um metal precioso, como o ouro, que o torna resistente a agentes químicos,  
mesmo os agentes ácidos. Todos os espelhos cumprem a norma ISO 7153-1.

## SPRAY PARA TESTE DE VITALIDADE DENTÁRIA



### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Spray refrescante odontológico que alcança temperatura de até  $-50^{\circ}\text{C}$ , indicado para auxiliar no diagnóstico por teste de vitalidade dentária. Congela rapidamente pellets e pequenos rolos de algodão, possui cânula de prolongamento para aplicação precisa e é inodoro.

### INDICAÇÕES:

Indicado para teste de vitalidade pulpar/dentária, por meio do congelamento de pellets ou pequenos rolos de algodão para aplicação do estímulo frio no dente.

### APRESENTAÇÃO COMERCIAL:

Frasco aerossol com 200ml.



# MASTERSIL LAB E CATALIZADOR

## SILICONE DE ALTA PRECISÃO PARA TRABALHOS PROTÉTICOS



### MASTERSIL LAB

Silicone de muralha para laboratório de prótese, com alta estabilidade dimensional, resistência ao calor e excelente fidelidade de cópia. Indicado para provisórios, mock-ups, máscaras gengivais, preenchimento de resina e outras aplicações laboratoriais.



### MASTERSIL CATALIZADOR

Catalisador de uso profissional e universal para o MasterSil Lab, responsável pela preparação e cura do material. Sua quantidade permite ajustar os tempos de trabalho e de presa conforme a necessidade do procedimento.

## SUTURAS CIRÚRGICAS ODONTOLÓGICAS SEDA E NYLON

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Fios de sutura odontológicos de alta qualidade, indicados para fechamento de tecidos gengivais e mucosos em procedimentos cirúrgicos. Agulhas em aço inoxidável de ponta triangular ou circular, que permitem penetração precisa e segura.

### Modelos:

**Seda:** não absorvível, trançado, maleável, com nós firmes.

**Nylon:** não absorvível, monofilamento, alta resistência, baixa reação tecidual e fácil remoção.

### INDICAÇÕES:

Suturas em procedimentos cirúrgicos odontológicos.

Fechamento de tecidos gengivais e mucosos.

Uso exclusivo por profissionais habilitados.

### APRESENTAÇÃO COMERCIAL:

Caixa com 12 e 24 unidades.



## FIO DE SUTURA

## BLOCOS E PASTILHAS DE DISSILICATO DE LÍTIO



### MASTERCAD

Blocos de dissilicato de lítio para CAD/CAM, com alta resistência, precisão de fresagem e boa estética.

Embalagens: 3 ou 5 blocos.



### MASTERPRESS

Pastilhas de dissilicato de lítio para prensagem, com ótimo escoamento, definição e translucidez.

Embalagens: 3, 5 ou 10 pastilhas.

## KIT PARA CONFEÇÃO DE ATTACHMENTS EM ALINHADORES ORTODÔNTICOS



### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

ORTHO MASTER é um kit odontológico completo para a confecção de attachments. Reúne a resina fotopolimerizável MATCH CLEAR, com viscosidade adequada para inserção e modelagem, e o sistema adesivo MATCH BOND, que promove a adesão à superfície dental previamente preparada.

### INDICAÇÕES:

Indicado para a confecção e colagem de attachments, também chamados de calços ortodônticos, utilizados em tratamentos com alinhadores. Auxilia na movimentação dentária conforme o planejamento digital 3D. Uso exclusivo por profissional habilitado.

### APRESENTAÇÃO COMERCIAL:

Kit contendo:

2 seringas de MATCH CLEAR com 3 g cada  
1 frasco de MATCH BOND com 5 mL

# Ortho Master

## ESPUMA ANTIBACTERIANA PARA LIMPEZA DE ALINHADORES E PRÓTESES



### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Masterclean é uma espuma antibacteriana em aerossol para a limpeza de alinhadores, aparelhos ortodônticos removíveis, próteses bucais, placas de mordida, aparelhos de apneia, protetores bucais e outros.

### INDICAÇÕES:

é indicado para limpeza de alinhadores, aparelhos ortodônticos removíveis, próteses bucais removíveis, placas de mordida, aparelho de apneia, protetores bucais entre outros.

### APRESENTAÇÃO COMERCIAL:

Frasco com 150ml/125g.

# MASTERCLEAN

## TIRAS ODONTOLÓGICAS

### TIRA DE LIXA DE AÇO WILCOS MASTER



Utilizada para acabamento e polimento das faces proximais das restaurações em compósitos, acrílicos, ionômero de vidro e amálgama.

**Apresentação Comercial:**

Embalagem com **12 unidades**, disponíveis em larguras de **4 mm** e **6 mm**.

### TIRA DE LIXA DE POLIÉSTER



Indicada para acabamento em restaurações interproximais com resinas compostas.

Possui corte macio e maior durabilidade do diamante e corte macio, com centro neutro que facilita a inserção entre os dentes.

**Apresentação Comercial:**

Embalagens com **50, 100 ou 150 unidades**.

### TIRA DENTADA EM AÇO HORICO



Indicada para remoção de excessos e acabamento interproximal de compósitos, cimentos resinosos e adesivos, sem danificar a área de contato.

Fabricada em aço inoxidável alemão de alta qualidade.

**Apresentação Comercial:**

Embalagens com **3 e 5 unidades (largura 6 mm)**.

### TIRA PROFILÁTICA AÇO INOX HORICO



Indicada para procedimentos de profilaxia na região proximal. Eficaz na remoção de cálculos dentais, mantendo a integridade do esmalte e dos materiais restauradores.

**Apresentação Comercial:**

Pacote com **6 unidades**.

### TIRA DIAMANTADA PERFURADA HORICO




Indicada para acabamento interproximal de compósitos, cimentos resinosos e adesivos, além de uso em Ortodontia.

Possui espaço central neutro (gap), disponível em granulações médio, fino e ultrafino, utilizadas em sequência.

**Apresentação Comercial:**

Kit com **3 unidades** ou individual.

### TIRA DE LIXA DE AÇO HORICO

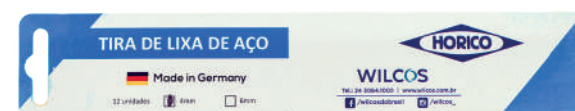

Linha Horico referencia mundial alemã, reconhecida pela alta qualidade.

Disponível nas versões: tiras de aço, tiras dentadas, tiras perfuradas e tiras diamantadas perfuradas.

**Apresentação Comercial:**

Embalagem com **12 unidades**, disponíveis em larguras de **4 mm** e **6 mm**.

## BROCAS E LIMAS DE ALTA QUALIDADE



### LIMAS K

Utilizada para exploração, alargamento e preparo das paredes dos canais radiculares. Apresenta menor risco de fratura devido à sua secção transversal quadrada.

**Embalagem disponível nos comprimentos de 21 mm, 25 mm e 31 mm, em caixa com seis unidades (nº 15 a 40 - 45 a 80) ou individual.**



### LIMAS H

Excelente capacidade de corte no alargamento de canais radiculares com técnica manual. Sua ponta em forma de gota (cônica) evita a perfuração do canal.

**Embalagem disponível nos comprimentos de 21 mm, 25 mm e 31 mm, em caixa com seis unidades (nº 15 a 40 - 45 a 80) ou individual.**



### LIMAS FLEXILE

As limas Flexile Wendo têm uma secção transversal triangular, para fornecer melhor flexibilidade no preparo de canais radiculares.

**Embalagem disponível nos comprimentos de 21 mm, 25 mm e 31 mm, em caixa com seis unidades (nº 15 a 40) ou individual.**



### EXTIRPA NERVOS

Para remoção fácil e segura de tecido pulpar 32 farpas simetricamente distribuídas no núcleo. São resilientes evitando a perfuração do canal sob uso adequado. Estirpanervos curto com cabo plástico.

**Embalagem disponível nos comprimentos de 21 mm, em caixa com dez unidades.**



### CONDENSADORES (SPREADERS)

Para técnica lateral de condensação de gutapercha com ponta.

**Embalagem disponível nos comprimentos de 21 mm, 25 mm, em caixa com seis unidades (nº 15 a 40 - 45 a 80).**



### CONDENSADORES PLUGGERS

Para técnica vertical de condensação de gutapercha sem ponta.

**Embalagem disponível nos comprimentos de 21 mm, 25 mm, em caixa com seis unidades (nº 15 a 40 - 45 a 80).**



### BROCAS GATES / PEESO (LARGO)

São usadas para alargar o terço coronário e cervical, enquanto as brocas de Peeso largas são indicadas para alargar a entrada do canal, remover a guta-percha e preparar o canal para pinos. **Embalagem disponível nos comprimentos de 28 mm, 32 mm, em caixa com seis unidades ou individual.**



### LENTULO (PASTE CARRIERS)


Para preenchimento do canal radicular com materiais endodônticos.

**Embalagem disponível nos comprimentos de 21 mm, 25 mm, em caixa com quatro unidades (25 a 40).**

Consulte-nos para modelos e preços.

## INSTRUMENTAIS PRODUZIDOS EM AÇO INOX ESCOVADO

### ALICATES PARA ORTODONTIA

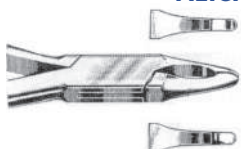

#### MODELO 114 (JHONSON)

Indicado para contorno gengival de bandas.

### ALICATES PARA ORTODONTIA



#### MODELO 121 (BICO DE PATO OU BICO PLANO)

Indicado para retificação de fios e auxiliar na confecção de anéis metálicos.

### ALICATES PARA ORTODONTIA



#### MODELO 139

Indicado para trabalhar com fios redondos, bicos cônicos e prismáticos. Limites de uso em fios de 0,7mm.

### FÓRCEPS ADULTO E INFANTIL - ENCAIXE AMERICANO



#### MODELO N° 1 STANDARD - 18CM

Indicado para Incisivos e Caninos Superiores.

### FÓRCEPS ADULTO E INFANTIL - ENCAIXE AMERICANO



#### MODELO N° 16 - 17CM

Indicado para Molares Inferiores. Possui a mesma indicação do Fórceps n° 23.

### FÓRCEPS ADULTO E INFANTIL - ENCAIXE AMERICANO



#### MODELO N° 17 - 17,5CM

Indicado para Molares Inferiores - ambos os lados.

### FÓRCEPS ADULTO E INFANTIL - ENCAIXE AMERICANO



#### MODELO N° 18L - 17,5CM (HARRIS)

Indicado para Molares Superiores Lado Esquerdo.

### FÓRCEPS ADULTO E INFANTIL - ENCAIXE AMERICANO



#### MODELO N° 18R - 17,5CM (HARRIS)

Indicado para Molares Superiores Lado Direito.

### FÓRCEPS ADULTO E INFANTIL - ENCAIXE AMERICANO



#### MODELO N° 23 - 17,5CM (CHIFRE DE TOURO)

Indicado para Molares Inferiores ambos os lados.

### FÓRCEPS ADULTO E INFANTIL - ENCAIXE AMERICANO



#### MODELO N° 65 - 18,5CM

Indicado para Incisivo e Raízes Superiores - ambos os lados.

### FÓRCEPS ADULTO E INFANTIL - ENCAIXE AMERICANO



#### MODELO N° 69 - 18,5CM (TOMES)

Indicado para fragmentos de Raízes e Raízes Pequenas Superiores e Inferiores.

### FÓRCEPS ADULTO E INFANTIL - ENCAIXE AMERICANO



#### MODELO N° 101 - 15CM (HULL)

Universal para Pré Molares e Dentes de Leite.

### FÓRCEPS ADULTO E INFANTIL - ENCAIXE AMERICANO



#### MODELO N° 150 - 17,5CM (CRYER)

Indicado para Pré Molares, Caninos, Incisivos e Raízes Superiores - ambos os lados.

### FÓRCEPS ADULTO E INFANTIL - ENCAIXE AMERICANO



#### MODELO N° 151 - 17,5CM (CRYER)

Indicado para Pré Molares, Caninos, Incisivos e Raízes Inferiores - ambos os lados.

**GARANTIA DE 5 ANOS**

## INSTRUMENTAIS PRODUZIDOS EM AÇO INOX ESCOVADO

### PINÇA ANATÔMICA

MODELO COLLEGE - 15CM



Adulto e Infantil.

### PINÇAS ANATÔMICAS

MODELO ADSON 12 CM COM DENTE E SEM DENTE



Adulto e Infantil.

### PINÇAS ANATÔMICAS


DENTADA (DENTE DE RATO) -12CM

SERRILHADA - 16CM




### PINÇAS HEMOSTÁTICAS

MODELO HALSTED (MOSQUITO)  
12 CM - CURVA OU RETA

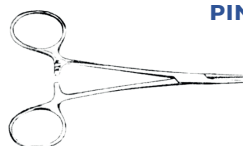

### PINÇAS HEMOSTÁTICAS

MODELO KELLY 14CM  
CURVA OU RETA

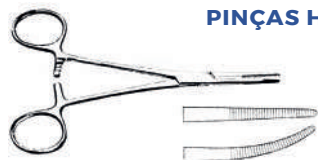

### PINÇAS HEMOSTÁTICAS

MODELO KOCHER 14CM  
CURVA OU RETA




### PINÇAS DIVERSAS

MODELO MILLER - PINÇA PARA  
PAPEL CARBONO OU FILME DE  
OCCLUSÃO




### PINÇAS DIVERSAS

MODELO BACKHAUS - 13CM

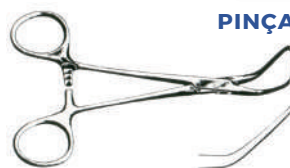

### PINÇAS DIVERSAS

MODELO ALLIS - 15CM

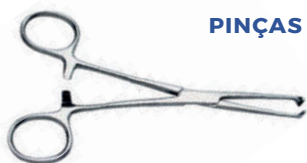

### PINÇAS DIVERSAS

PINÇA PARA GRAMPOS  
MODELO PALMER



### PINÇAS DIVERSAS

SACA PROTÉSE



### PORTA AGULHAS

MODELO MAYO-HEGAR -14  
E 16 CM RETO E OU CURVO



### PORTA AGULHAS

MODELO MATHIEU -14 E 16 CM



### PORTA AGULHAS

MODELO CASTROVIEJO / VÍDIA -16 CM



**GARANTIA DE 5 ANOS**

## INSTRUMENTAIS PRODUZIDOS EM AÇO INOX ESCOVADO

### TESOURAS



MODELO JOSEPH - 4CM CURVA E RETA

### TESOURAS



MODELO ÍRIS - CURVA E RETA

Adulto e Infantil.

### TESOURAS




MODELO METZEMBAUM  
CURVA E RETA

### TESOURAS



MODELO GOLDMAN FOX  
CURVA E RETA

### TESOURAS

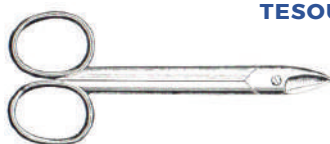

MODELO PARA OURO  
CURVA OU RETA

### ESPECÍMETROS

PARA METAL



PARA CERA



### CABOS PARA LÂMINAS DE BISTURI




### PERFURADOR DE DIQUE



MODELO AINSWORTH

### PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE

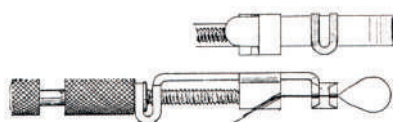

### ESPÁTULAS PARA PRÓTESE



REPOSIÇÃO DE PONTAS  
ROSQUEÁVEIS DE FÁCIL  
SUBSTITUIÇÃO



**GARANTIA DE 5 ANOS**

## CERÂMICA DE RECOBRIMENTO VITA PARA METALOCERÂMICA



### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Cerâmica de recobrimento para estruturas metalocerâmicas, sucessora das consagradas VITA VMK 68 e 95. Combina estética natural, segurança e versatilidade, com esquema clássico de estratificação dentina-bordo incisal e massas adicionais para personalização (luminescência, translucidez e efeitos de profundidade). Adequada também para metais não preciosos graças à ótima temperatura de queima.

### INDICAÇÕES:

Recobrimento de estruturas metálicas convencionais e não preciosas.  
Restaurações unitárias ou complexas com exigência estética elevada.  
Individualizações personalizadas com massas adicionais.

### APRESENTAÇÃO COMERCIAL:

26 cores 3D master + 3 blister.  
Potes com 50g e 250g.

# VITA VMK Master®

# VITA

## ESCALAS VITA PARA SELEÇÃO PRECISA DE COR DENTÁRIA




**ESCALA CLASSICAL**

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Líder mundial em aferição de cores dentárias, as escalas VITA Classical e 3D Master determinam o padrão utilizado por todos odontólogos e técnicos em próteses dentárias.

A escala Classical, inventada há mais de 50 anos, oferece 16 cores naturais distribuídas de acordo com o valor, tonalidade e intensidade.

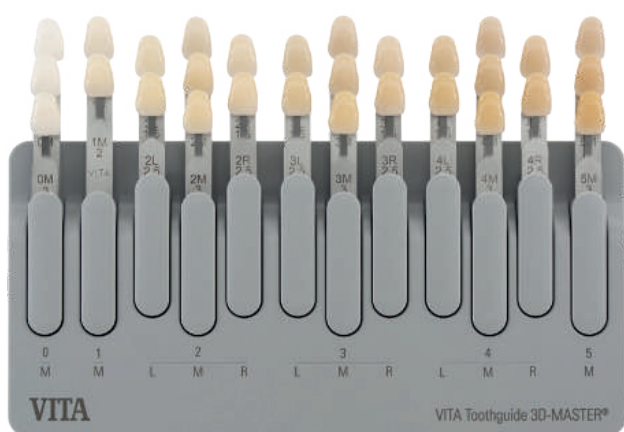

**ESCALA 3D MASTER**

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A escala VITA 3D Master é uma evolução natural oferecendo 26 cores naturais e 3 cores clareadas.

Possibilita ainda divisão ao seu ordenamento. Se divide-se em 3 grupos ordenados, baseando-se em valor, intensidade e tonalidade.

# VITA

## DENTES MULTIFUNCIONAIS VITA PARA PRÓTESES ESTÉTICAS E FUNCIONAIS



### DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Dentes multifuncionais de três camadas, com forma natural, translucidez, opalescência e fluorescência, garantindo estética avançada e conforto funcional. Produzidos em material sintético altamente reticulado, oferecem resistência ao desgaste, estabilidade de cor, biocompatibilidade e fácil polimento.

### INDICAÇÕES:

Próteses totais, implantossuportadas, telescópicas, combinadas, esqueléticas e soluções provisórias.

### APRESENTAÇÃO COMERCIAL:

#### CORES DISPONÍVEIS

**VITA classical:** A1–D4: A1 · A2 · A3 · A3.5 · A4 · B1 · B2 · B3 · B4 · C1 · C2 · C3 · C4 · D2 · D3 · D4  
**VITA SYSTEM 3D MASTER:** 0M1 · 0M2 · 0M3 · 1M1 · 1M2 · 2M1 · 2M2 · 2M3 · 3M1 · 3M2 · 3M3 · 4M1 · 4M2 · 4M3 · 5M1 · 5M2 · 5M3.

#### MODELOS DISPONÍVEIS

**Anteriores Superiores:** O40 · O41 · T41 · T42 · T43 · R42 · R44 · R45 · S46 · S47 · S48.

**Anteriores Inferiores:** L33 · L34 · L37 · L37LN · L40.

**Posteriores Superiores:** PU29 · PU31 · PU33

**Posteriores Inferiores:** PL29 · PL31 · PL33.

# VITA MFT®

# VITA

## GLAZE E PIGMENTOS UNIVERSAIS PARA CERÂMICAS DENTÁRIAS



### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

VITA AKZENT® Plus é um sistema de stains (pigmentos cerâmicos) e glaze fluorescentes para caracterização externa de restaurações cerâmicas dentárias, independentemente do coeficiente de expansão térmica (CTE).

Permite otimização da cor, ajustes de sombra e efeitos estéticos (masking, chroma e glaze) em cerâmicas de diferentes tipos: cerâmicas de estratificação, prensadas, blocos CAD/CAM.

### INDICAÇÕES:

Para caracterização estética interna e externa (efeitos superficiais) de restaurações cerâmicas.

Compatível com diferentes cerâmicas: cerâmicas de revestimento, prensadas, blocos CAD/CAM, zircônia etc.

### APRESENTAÇÃO COMERCIAL:

14 cores de pigmentos, 2 glazers especiais, 1 agente de acabamento e 1 fluido de mistura.

# VITA AKZENT® Plus

# VITA

## CERÂMICA PARA PRENSAGEM COM ALTA ESTÉTICA



### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Cerâmica de prensagem em dissilicato de lítio reforçado com zircônio.

Oferece alta estética, fidelidade de cor, dinâmica de luz natural e resistência superior a 500 MPa.

### INDICAÇÕES:

Facetas, inlays/onlays, coroas totais ou parciais

Pontes de até 3 elementos (até o 2º pré-molar)

Restaurações monolíticas ou recobertas.

### APRESENTAÇÃO COMERCIAL:

Pastilhas em tamanhos S e L

Translucidez: T, HT, MT

Cores: VITA classical A1–D4 + Bleached Shades

Sistema completo: massa de revestimento, mufla e êmbolos descartáveis.

# VITA AMBRIA®

# VITA

## BLOCOS DE CAD/CAM EM CERÂMICAS FELDSPÁTICAS E EM DISSILICATO DE LÍTIO



# VITABLOCS®

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Blocos de cerâmica feldspática de estrutura fina para sistemas CAD/CAM, com milhões de restaurações comprovadas clinicamente. Oferecem alta estética natural, excelente integração de cor e durabilidade de padrão-ouro, além de serem fáceis de usinar, polir e fixar.

### INDICAÇÕES:

Inlays, onlays, facetas, coroas parciais, coroas totais e endocoroas em molares.

Modelos especiais: VITABLOCS TriLuxe Forte (graduação de cor integrado) e VITABLOCS RealLife (estrutura 3D para estética anterior avançada).

### APRESENTAÇÃO COMERCIAL:

**Mark II** – monocromático.

**TriLuxe forte** – multicromático em camadas.

**RealLife** – estrutura 3D dentina/esmalte.

Cores nos sistemas VITA classical A1–D4 e VITA SYSTEM 3D-MASTER, em vários tamanhos para CAD/CAM.

**VITA SUPRINITY®** - cerâmica de silicato de lítio reforçada com zircônia (ZLS).

**VITA ENAMIC®** – cerâmica híbrida CAD/CAM com matriz dual (cerâmica e polímero).

Alta resistência, elasticidade natural e excelente adaptação marginal.

Disponível nas versões HT, ST e HT.

# VITA

## VITA LUMEX É A ÚNICA CERÂMICA NO MUNDO PARA 5 TIPOS DE SUBSTRUTURAS E MATERIAIS



### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

VITA LUMEX® AC é um sistema cerâmico de recobrimento altamente estético, compatível com todos os materiais cerâmicos convencionais, como zircônia, dissilicato de lítio, titânio, refratário e feldspato. Oferece fidelidade de cor, excelente dinâmica de luz e um processamento final eficiente e confiável, garantindo resultados naturais e resistentes.

### INDICAÇÕES:

Indicada para o recobrimento de estruturas cerâmicas convencionais e na fabricação de restaurações estéticas, como facetas e reconstruções sem estrutura. Proporciona reprodução fiel de cor, translucidez, fluorescência e opalescência.

### APRESENTAÇÃO COMERCIAL:

Disponível em diferentes kits: Standard, Expert, Cut-back, Gengiva e Starter, contendo massas **ENAMEL**, **DENTINE**, **OPAQUE** e efeitos especiais, além de acessórios para modelagem e glaze.

# VITA LUMEX® AC

# VITA

## CERÂMICA LÍQUIDA PARA CARACTERIZAÇÃO 3D SIMPLIFICADA E TEXTURAS ULTRA FINAS



### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

VITA LUMEX® UNIQUE Cerâmica líquida para caracterização 3D simplificada e texturas ultra finas. proporcionando resultados de excelência estética sem a necessidade de estratificação completa do trabalho.

Proporciona às restaurações monolíticas o toque final - fácil, rápida e efetiva.

O sistema de cerâmica líquida consiste de pastas fluorescentes prontas para uso e que são usadas para criar uma estética única e efeitos tridimensionais de profundidade.

Com apenas algumas pinceladas as restaurações monolíticas se transformam em trabalhos perfeitos.

### INDICAÇÕES:

Acabamento estético de restaurações monolíticas (zircônia, dissilicato de lítio, feldspato).

Caracterização 3D de recobrimentos parciais ou completos.

Estética rosa: reprodução natural da gengiva.

Combinação ideal com VITA LUMEX® AC em técnica mista.

### APRESENTAÇÃO COMERCIAL:

**EFFECT PASTE** (Translucent, Mamelon, Highlighting, Chroma, Gengiva).

**TEXTURE PASTE** (dente e gengiva).

**GLAZE** (fluorescente e não fluorescente).

**LIQUID** em diferentes volumes.

**Kits disponíveis:**

**STANDARD KIT VITA** classical A1–D4

**STANDARD KIT VITA SYSTEM 3D-MASTER.**

# VITA LUMEX® UNIQUE

# VITA

## REVESTIMENTO UNIVERSAL PARA PRÓTESE FIXA E CERÂMICA PRENSADA



# Bellavest SH

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Revestimento para prótese fixa e cerâmica prensada, ideal para fundição de precisão em coroas e pontes.

Possui aquecimento rápido ou convencional, é livre de grafite e ligado com fosfato.

### INDICAÇÕES:

Revestimento universal para todo o espectro de ligas dentais (exceto titânio).

Excelente desempenho com ligas não preciosas (ex.: Wironia Light, Wiron 99).

Também indicado para ligas preciosas. Compatível com o líquido de mistura Begosol HE, facilitando o manuseio.

### APRESENTAÇÃO COMERCIAL:

Caixa com 990 g de pó (11 envelopes de 90 g)  
+ Begosol HE 225 ml

Caixa com 4,050 kg de pó (45 envelopes de 90 g)  
+ Begosol HE 1 L

Caixa com 12,960 kg de pó (144 envelopes de 90 g).

## LÍQUIDO DE MISTURA PARA REVESTIMENTOS



### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Begolsol HE (High Expansion) é um líquido de mistura especial destinado para revestimento Bellavest® SH.

### INDICAÇÕES:

Ideal quando se deseja controlar expansão do revestimento conforme a concentração de líquido. Pode ser misturado à água destilada ou desmineralizada para obtenção da proporção de mistura requerida.

Quanto maior seja a concentração do líquido de mistura, maior será a expansão do revestimento.

### APRESENTAÇÃO COMERCIAL:

Disponível em frascos de 225 ml ou 1 L.

# Begosol HE

## LIGA METÁLICA NÃO PRECIOSA Á BASE DE NIQUEL-CROMO, LIVRE DE BERÍLIO, PARA TÉCNICA DE METALOCERÂMICA E RESINAS



### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Fundição simples, com oxidação clara, acabamento fácil e processamento seguro. As excelentes propriedades de fluidez asseguram adaptações perfeitas da liga na mufla.

O óxido da Wironia Light é notavelmente mais claro quando comparado a outras ligas convencionais de NiCr, sendo eliminável de maneira mais simples e rápida.

A redução da temperatura para 800 °C permite obter uma superfície muito lisa da estrutura fundida.

Material biocompatível e muito resistente à corrosão, devido à sua capa passiva aderente. Compatível com Bellavest SH.

### APRESENTAÇÃO COMERCIAL:

Potes com 62 g, 250 g e 1 kg.

# Wironia<sup>®</sup>

Light

## MATERIAL PARA MUNHÕES REFRATÁRIOS E INCRUSTAÇÕES DO TIPO INLAYS, ONLAYS E FACETAS CERÂMICAS



### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Graças ao seu comportamento de expansão, adaptado às cerâmicas de reconhecidos fabricantes, BegoForm proporciona um excelente ajuste individualizado a onlays, inlays e facetas.

Os munhões, com bordas muito resistentes e superfícies lisas e de grande precisão, oferecem as condições ideais para processar materiais cerâmicos sem dificuldade, impedindo fissuras indesejáveis na cerâmica.

O controle seguro da expansão, com o líquido especial de mistura, proporciona resultados de ajuste excelentes.

### APRESENTAÇÃO COMERCIAL:

- 1 caixa = 1,350 kg (15 sacos de 90 g cada) + 250 ml de líquido de mistura BegoForm® + 1 seringa doseadora.

- Mini Kit: 180g (2 envelopes de 90g cada) + 36 ml de líquido de mistura.

# BegoForm®

## QUALIDADE MÁXIMA PARA UM TRABALHO DE PRECISÃO

### DISCOS DIAMANTADOS



232 – 7/8



DISCO DIAMANTADO 3-4  
ECO U355C190  
ECO U 355F190



DISCO DIAMANTADO 7-8  
ECO U355C220  
ECO U 355F220



H333C450



H355C190



H355C220



H355F190



H355F220



H355XF190



H355XF220



H357C190



H357C220




H357F190



H357F220

## PONTAS DIAMANTADAS PARA CLÍNICA E PRÓTESE DENTÁRIA
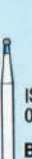
| PONTAS DIAMANTADAS                                                                                                            |  |                                                                                                                               |  |                                                                                                                                 | MANI®                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <br>ISO 173/018<br><b>TF-13</b><br>NB 4072   |  |                                                                                                                               |  |                                                                                                                                 | <br>ISO 171/014<br><b>TF-20</b><br>NB 1066                       |                                                                                                                                 |  |
| <br>ISO 170/021<br><b>TF-22</b><br>NB 3131   |  |                                                                                                                               |  |                                                                                                                                 | <br>ISO 170/018<br><b>TF-23</b><br>NB 3127                       |                                                                                                                                 |  |
| <br>ISO 170/016<br><b>TF-31</b><br>NB 1064   |  |                                                                                                                               |  |                                                                                                                                 | <div>Pontas Diamantadas FG</div> <div><b>DIA-BURS</b></div> <div><small>DIAMOND INSTRUMENTS FROM NEW HIGH TECHNOLOGY. (FOR F&amp;B)</small></div> |                                                                                                                                 |  |
| TF Series                                                                                                                     |  |                                                                                                                               |  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |  |
| <br>ISO 199/016<br><b>TR-11</b><br>NB 3072   |  | <br>ISO 199/016<br><b>TR-12</b><br>NB 3073   |  | <br>ISO 198/018<br><b>TR-13</b><br>NB 3139     |                                                                                                                                                   | <br>ISO 198/022<br><b>TR-14</b><br>NB 3140     |  |
| <br>ISO 200/022<br><b>TR-15</b><br>NB 5017   |  | <br>ISO 200/024<br><b>TR-19</b><br>NB 2134   |  | <br>ISO 197/014<br><b>TR-20</b><br>NB 2134   |                                                                                                                                                   | <br>ISO 197/016<br><b>TR-21</b><br>NB 2135   |  |
| TR Series                                                                                                                     |  |                                                                                                                               |  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |  |
| <br>ISO 197/018<br><b>TR-24</b><br>NB 4137 |  | <br>ISO 199/016<br><b>TR-25</b><br>NB 4130 |  | <br>ISO 199/018<br><b>TR-26</b><br>NB 4138   |                                                                                                                                                   | <br>ISO 160/016<br><b>TC-11</b><br>NB 3195   |  |
| <br>ISO 160/014<br><b>TC-21</b><br>NB 3193 |  | <br>ISO 160/012<br><b>TC-26</b><br>NB 2200 |  | <br>ISO 299/012<br><b>FO-11</b><br>NB 3203 |                                                                                                                                                   | <br>ISO 298/014<br><b>FO-21</b><br>NB 3205 |  |
| TR Series                                                                                                                     |  |                                                                                                                               |  | TC Series                                                                                                                       |                                                                                                                                                   | FO Series                                                                                                                       |  |
| <br>ISO 298/016<br><b>FO-22</b><br>NB 3227 |  | <br>ISO 257/028<br><b>FO-25</b><br>NB 3218 |  | <br>ISO 257/018<br><b>FO-32</b><br>NB 3120   |                                                                                                                                                   | <br>ISO 111/012<br><b>SF-11</b><br>NB 3090   |  |
| <br>ISO 111/014<br><b>SF-12</b><br>NB 3099 |  | <br>ISO 110/014<br><b>SF-21</b><br>NB 2096 |  | <br>ISO 109/013<br><b>SF-31</b><br>NB 1092 |                                                                                                                                                   | <br>ISO 109/010<br><b>SF-41</b><br>NB 1091 |  |
| FO Series                                                                                                                     |  |                                                                                                                               |  | SF Series                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |  |
| <br>ISO 289/014<br><b>SO-21</b><br>NB 3216 |  | <br>ISO 141/012<br><b>SR-11</b><br>NB 3145 |  | <br>ISO 141/014<br><b>SR-12</b><br>NB 3146   |                                                                                                                                                   | <br>ISO 141/016<br><b>SR-13</b><br>NB 3147   |  |
| <br>ISO 553/019<br><b>RS-11</b>            |  | <br>ISO 545/018<br><b>RS-21</b>            |  | <br>ISO 544/018<br><b>RS-31</b>            |                                                                                                                                                   | <br>ISO 237/021<br><b>EX-21</b>            |  |
| EX Series                                                                                                                     |  |                                                                                                                               |  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |  |
| <br>ISO 220/017<br><b>EX-24</b><br>NB 3083 |  | <br>ISO 237/032<br><b>EX-26</b><br>NB 3168 |  | <br>ISO 001/018<br><b>BR-31</b><br>NB 1016   |                                                                                                                                                   | <br>ISO 001/016<br><b>BR-40</b><br>NB 1015   |  |
| <br>ISO 001/014<br><b>BR-41</b><br>NB 1014 |  | <br>ISO 001/010<br><b>BR-45</b><br>NB 1013 |  | <br>ISO 001/012<br><b>BR-46</b><br>NB 1012 |                                                                                                                                                   | <br>ISO 001/008<br><b>BR-49</b><br>NB 1011 |  |

## PONTAS DIAMANTADAS PARA CLÍNICA E PRÓTESE DENTÁRIA

| PONTAS DIAMANTADAS <b>MANI</b>                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>ISO 002/014<br><b>BC-42</b><br>NB 1024       | <br>ISO 010/012<br><b>SI-46</b><br>NB 1033       | <br>ISO 010/014<br><b>SI-47</b><br>NB 1043       | <br>ISO 010/016<br><b>SI-48</b><br>NB 1035       | <br>ISO 160/014<br><b>TC-S21</b>                 | <br>ISO 002/014<br><b>BC-S42</b>                 | <br>ISO 002/012<br><b>BC-S43</b>                 | <br>ISO 001/010<br><b>BR-S45</b><br>NB S1012     |
| BC Series                                                                                                                         |                                                                                                                                   | SI Series                                                                                                                         |                                                                                                                                   | S Series                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |
| <br>ISO 001/012<br><b>BR-S46</b><br>NB S1013     | <br>ISO 010/012<br><b>SI-S46</b><br>NB S1033     | <br>ISO 173/018<br><b>TF-13C</b><br>NB 4072G     | <br>ISO 198/018<br><b>TR-13C</b><br>NB 3139G     | <br>ISO 197/018<br><b>TR-62C</b><br>NB 2136G     | <br>ISO 160/016<br><b>TC-11C</b><br>NB 3195G     | <br>ISO 257/018<br><b>FO-32C</b><br>NB 3129G     | <br>ISO 190/018<br><b>FO-54C</b><br>NB 2082      |
| C Series                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |
| <br>ISO 010/014<br><b>SI-47C</b><br>NB 1034C   | <br>ISO 111/014<br><b>SF-12C</b><br>NB 3099C   | <br>ISO 001/018<br><b>BR-31C</b><br>NB 1016C   | <br>ISO 173/016<br><b>TF-12F</b><br>NB 3071F   | <br>ISO 171/016<br><b>TF-21F</b><br>NB 2136G   | <br>ISO 199/016<br><b>TR-11F</b><br>NB 3072F   | <br>ISO 198/018<br><b>TR-13F</b><br>NB 3139F   | <br>ISO 197/016<br><b>TR-21F</b><br>NB 2135F   |
| F Series                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |
| <br>ISO 199/016<br><b>TR-25F</b><br>NB 4130F   | <br>ISO 199/018<br><b>TR-26F</b><br>NB 4138F   | <br>ISO 160/016<br><b>TC-11F</b><br>NB 3195F   | <br>ISO 160/014<br><b>TC-21F</b><br>NB 3193F   | <br>ISO 298/014<br><b>FO-21F</b><br>NB 3205F   | <br>ISO 298/016<br><b>FO-22F</b><br>NB 3227F   | <br>ISO 150/012<br><b>EX-18F</b><br>NB 2173F   | <br>ISO 237/021<br><b>EX-21F</b><br>NB 2134F   |
| <br>ISO 247/007<br><b>CD-57F</b>               | <br>ISO 173/016<br><b>TF-12EF</b><br>NB 3071EF | <br>ISO 171/016<br><b>TF-21EF</b><br>NB 2135EF | <br>ISO 199/016<br><b>TR-11EF</b><br>NB 3072EF | <br>ISO 198/018<br><b>TR-13EF</b><br>NB 3139EF | <br>ISO 197/016<br><b>TR-21EF</b><br>NB 2135EF | <br>ISO 199/016<br><b>TR-25EF</b><br>NB 4137EF | <br>ISO 199/018<br><b>TR-26EF</b><br>NB 4138EF |
| EF Series                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |
| <br>ISO 160/016<br><b>TC-11EF</b><br>NB 3195EF | <br>ISO 298/016<br><b>FO-22EF</b>              | <br>ISO 237/021<br><b>EX-21EF</b>              | <br>ISO 160/014<br><b>TC-21EF</b><br>NB 3193EF | <br>ISO 298/014<br><b>FO-21EF</b><br>NB 3205EF | <br>ISO 196/020<br><b>CR-11F</b>               | <br>ISO 197/012<br><b>CR-21F</b><br>NB 2134F   | <br>ISO 289/013<br><b>CR-22F</b><br>NB 2135F   |

## LINHA DE LIMAS E BROCAS MANI

### LIMAS K



Comprimento: 21, 25, 31 mm  
Quantidade: 6 por cx  
Tamanho: 06~80  
Sortido: 15~40 45~80

### LIMAS HEDSTROEM



Comprimento: 21, 25, 31 mm  
Quantidade: 6 por cx  
Tamanho: 06~80  
Sortido: 15~40 45~80

### LIMAS FLEXILE



Comprimento:  
21, 25 mm  
Quantidade: 6 por cx  
Tamanho: 15~40  
Sortido: 15~40

### LIMA D FINDERS



Comprimento:  
21, 25 mm  
Quantidade: 6 por cx  
Tamanho: 8, 10, 15

### LENTULOS



Comprimento:  
21, 25 mm  
Quantidade: 4 por cx  
Tamanho: 25~40  
Sortido: 25~40

### BROCAS DE GATES



Comprimento: 28, 32 mm  
Quantidade: cx c/ 1 ou 6 unid.  
Tamanho: 1, 2, 3, 4, 5, 6  
\*inox

### BROCAS DE PEESO (LARGO)



Comprimento: 28, 32 mm  
Quantidade: cx c/ 1 ou 6 unid.  
Tamanho: 1, 2, 3, 4, 5, 6  
\*inox

### BROCA GUTTA PERCHA

| Tamanho         | Diâmetro da ponta |                                                                                     |
|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1S (#70)</b> | 0.70              |  |
| <b>2S (#50)</b> | 0.50              |  |
| <b>3N (#40)</b> | 0.40              |  |
| <b>4N (#30)</b> | 0.30              |  |

S = Aço inoxidável, N = Níquel titânio

### CONDENSADORES



Comprimento: 25 mm  
Quantidade: 6 por cx  
Tamanho: 15~40  
Sortido: 15~40

## LINHA DE BROCAS MASTERCUT

### EXTRA FINA



201202



201402  
(486EX023)



202801  
(79EX040)



203001  
(251EX060)



203101  
(79EX060)



204902

### FINA I MINI-CUT



100202



100302  
(489FX023/1511)




100402



100602




100801  
(79FX040)

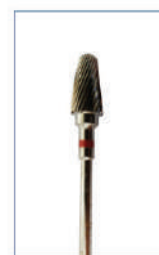

101001



101002

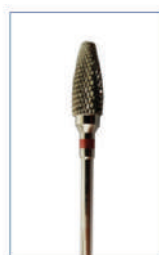

302001  
(251FX060/1517)



302202



302302  
(23FX023)




302402  
(486FX023)




302502  
(460FX023/1513)




302602  
(487FX023/1512)

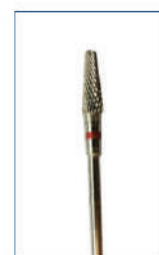

302801  
(79FX045/1520)

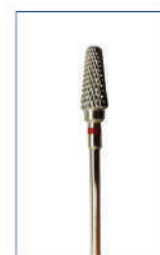

302901  
(79FX060)

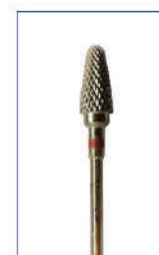

303001  
(251FX060/1517)



303101  
(75FX060)



304702  
(30MF023)

**MASTERCUT**

## LINHA DE BROCAS MASTERCUT

### GROSSA | MAX-CUT



405001  
(71GX060)



406102  
(23GX023/1574)



406202



406302  
(485GX023/1571)



406402  
(486GX023/1502)



406502  
(460GX023/1503)




406602  
(487GX023/1504)




406702  
(71GX040)




406801  
(79GX040)

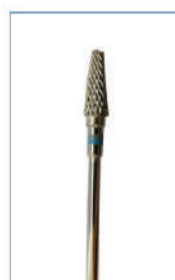


406901  
(75GX045/1510)

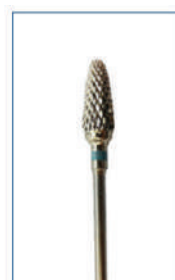

407001  
(351GX060/1507)

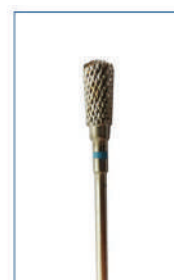


407101  
(77GX060/1506)

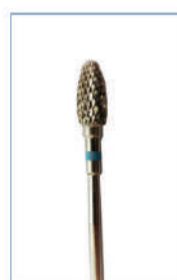


407301  
(251GX060/1251)



407401  
(75GX060/1509)

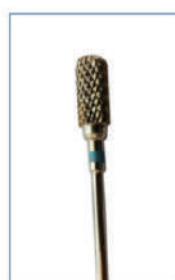

407402  
(72GX060/1572)

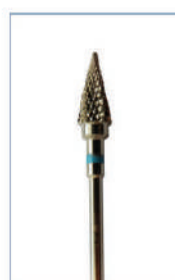


407501  
(257GX060/1576)

## LINHA DE BROCAS

### BROCA TRANSMETAL SAMURAI



### KIT HIRATA/SCOPIN MANI

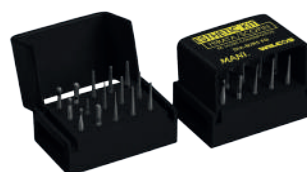

### BROCAS CIRÚRGICAS MASTERCUT



Broca Carbide  
Cirúrgica FGXL - 25mm



Broca Carbide Cirúrgica - 151 - Z  
Odontosecção - 23mm



Broca Carbide Cirúrgica - 151 - Z  
Odontosecção - 23mm

### BROCA DE ENDO ACESSO MASTERCUT



Broca Carbide - 152 - Endo  
Endo Acesso - 23mm

### BROCA STANDARD MASTERCUT



Broca Carbide FG - 19 e 21mm

### KIT MULTSET MEISINGER



### BROCA DE PEESO MEISINGER



### BROCA TRANSMETAL FG 1558

## TURBOCUT



### ALGODÃO LUNA ROEKO

Algodão versátil e bem estruturado, ideal para procedimentos clínicos e necessidades diárias dos dentistas.



### FILME DE ARTICULAÇÃO 12 $\mu$

Filme de articular Hanel 12 micras, indicado para verificar contatos oclusais com alta precisão.



### PAPEL DE ARTICULAÇÃO 40 $\mu$

Papel de articular Hanel 40 micras, ideal para marcação clara de contatos oclusais em ajustes e próteses.





## PAPEL DE ARTICULAÇÃO PARA MARCAÇÃO OCLUSAL



Papel de articulação para marcação oclusal. Dupla-face, super fino e elástico, não rasga facilmente.

Reflete com exatidão os registros oclusais, não havendo sensibilidade inadequada durante o registro e não havendo desvio maxilar.

Embalagens de 280 unidades, 250 unidades ou 12 unidades.

## BANDA MATRIZ TIPOTOFFLEMIRE

As matrizes são microfinas, com 0,04 mm, produzidas em diferentes formatos em aço inoxidável alemão. São pré-formadas e projetadas para se adaptar à morfologia dentária.

Embalagem com 12 unidades.



## MAGNUM CLARUM MESA

Magnum Clarum é uma liga a base de Níquel para cerâmica e não contém elementos tóxicos. É um material versátil e fácil de trabalhar. É uma liga caracterizada por alta resistência à corrosão e ao calor com baixa condutividade.



# WILCOS

— DESDE 1938 —



 @WILCOS\_

55 24 3064-1000



## MOTOR ELÉTRICO WPRO



### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Motor elétrico Wpro: O único motor elétrico no mundo totalmente independente de equipo, portátil e com seu próprio reservatório de água. Um ótimo aliado para performar sua técnica clínica, fazendo preparos com excelência e nitidez para que assim possa executar um escaneamento digital detalhado e fiel.

### INDICAÇÕES:

Trabalhos de próteses totais ou parciais.  
Revestimento de restaurações acrílicas e peças impressas em 3D.  
Selamento da superfície, prevenindo desgaste e acúmulo de placa bacteriana.  
Obtenção de um brilho duradouro, sem necessidade de polimento manual intenso.

# WPro

## WMax

**Equilíbrio perfeito de  
potência e ergonomia**

- Contra-ângulo multiplicador 1:5 de alta performance, precisão e ergonomia.
- Durável, constante e eficiente



## MOTOR DE IMPLANTE IMPLANT-X



### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Implant X é um motor de implante para procedimentos cirurgicos de alta precisão. Juntamente com o contra-ângulo com Led WPower, trazendo inovação e resistência. WPower é 20:1, possui alto torque e excelente desempenho para fresagem e fixação de implantes osseointegrados.

## IMPLANT X



### WPower

Contra-ângulo forte e estável

Contra-ângulo de alta precisão com oscilação mínima habilita um torque estável tanto em alta quanto em baixa rotação. Rolamentos avançados importados garantem desempenho e durabilidade do contra-ângulo.

## IMPRESSORAS 3D 2K E 4K




### HALOT R6 2K

A **HALOT R6 2K** é uma impressora 3D de alta precisão, ideal para modelos odontológicos, próteses e aplicações biocompatíveis. Com volume de impressão de **130,56 × 82,62 × 160 mm**, oferece ampla área útil e tela LCD monocromática de **6,08"** com **resolução 2K**, garantindo detalhes finos e excelente produtividade.

Seu eixo Z reforçado com trilho linear e estrutura anti-vibração proporcionam maior estabilidade e acabamento suave nas peças.

É econômica no consumo de resina, fácil de operar e perfeita para profissionais e iniciantes que buscam qualidade e precisão.

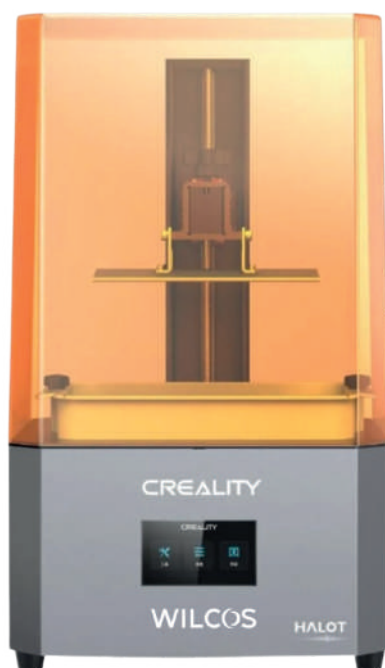

### HALOT - PLAY 4K

A **HALOT Play 4K** eleva a qualidade da impressão 3D com resolução **4K** em uma tela **LCD de 6,08"**, proporcionando precisão superior e acabamento impecável.

Com o mesmo volume de impressão de **130,56 × 82,62 × 160 mm**, é ideal para modelos odontológicos e aplicações exigentes.

Seu sistema de eixo Z reforçado e design otimizado reduzem vibrações e aumentam a estabilidade durante o processo.

Combina alta definição, eficiência e facilidade de uso, sendo a escolha ideal para quem busca resultados profissionais com excelente custo-benefício.

**CREALITY**

## IMPRESSORA 3D ODONTOLÓGICA COM CURA INTEGRADA



### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A PioNext Mini é uma impressora 3D odontológica compacta, com sistemas de impressão e cura integrados. Fácil de operar, possui tanques duplos de resina, câmara aquecida e dispensa nivelamento, proporcionando mais praticidade e eficiência à rotina digital.

### INDICAÇÕES:

Indicada para impressão 3D e pós-processamento de peças em clínicas, consultórios e laboratórios odontológicos. Suas dimensões compactas permitem a instalação mesmo em ambientes com espaço reduzido.

# PioNext Mini

## EQUIPAMENTOS DE PÓS-CURA



### WFlash

A WFlash é uma fotopolimerizadora UV de alta eficiência, ideal para o pós-processamento de impressões 3D. Com LEDs de alta potência e banda larga (375–470 nm), garante cura rápida e uniforme, economizando tempo de fabricação.

Seu circuito de corrente constante mantém a luz estável e dispensa a troca de tubos UV. Compacta, durável e de baixo consumo, é perfeita para quem busca produtividade e precisão.



### W3D LIGHT & CLEAN

A W3D Light & Clean é um equipamento 2 em 1 que realiza lavagem e cura UV, garantindo acabamento perfeito e sem deformações nas impressões 3D.

Com LEDs duplos (405 nm + 365 nm) e três opções de tempo de cura (2/4/6 min), proporciona rapidez, precisão e praticidade no pós-processamento.

Compacta e fácil de operar, oferece qualidade e economia de tempo para profissionais exigentes.



## ESPECTROFOTÔMETRO DIGITAL DE ALTA PRECISÃO

### VITA Easyshade® V



**Easyshade® V** é um espectrofotômetro digital de alta precisão, projetado para determinar a cor de dentes naturais e restaurações com resultados rápidos e confiáveis.

Com conectividade Bluetooth, integra-se a softwares e laboratórios, otimizando o fluxo digital odontológico. Possui modos dedicados para clareamento e controle de qualidade, além de um design compacto e ergonômico, ideal para clínicas e laboratórios que buscam precisão, rastreabilidade e tecnologia avançada.

### VITA Easyshade® Lite



**Easyshade® Lite** é um espectrofotômetro digital compacto e prático, que realiza a leitura da cor dos dentes em segundos com apenas um clique.

Oferece resultados imediatos e confiáveis diretamente no display, sem necessidade de treinamento.

Com design leve e fácil de usar, é perfeito para diagnósticos rápidos e seleção precisa de cor no consultório, garantindo agilidade e eficiência no atendimento clínico.

#### DIFERENÇAS PRINCIPAIS:

**Easyshade® V** é mais completo e conectado, ideal para laboratórios e clínicas digitais, com Bluetooth e múltiplos modos de uso.

**Easyshade® Lite** é a opção mais simples e prática, voltada para uso direto em consultório, com operabilidade rápida e sem integração externa.

# VITA

## INOVAÇÃO EM FORNOS PARA CERÂMICA E RESTAURAÇÕES DENTÁRIAS



### VITA SMART.FIRE®

#### Forno de Queima Compacto para Restaurações Odontológicas

Forno de queima compacto e de alto desempenho, projetado para cristalização, glazeamento e pigmentação de restaurações cerâmicas CAD/CAM.

Permite finalizar coroas, facetas e outras restaurações diretamente no consultório, garantindo precisão, estética superior e máxima praticidade clínica.



### VITA V60 I-LINE®

#### Forno de Queima de Cerâmica Dentária de Alta Precisão

Forno de queima de cerâmica dentária totalmente automático e de alta precisão. Com controle digital por ecrã tátil, calibração automática e câmara de queima em sílica fundida, garante resultados consistentes e de qualidade superior. Compacto, eficiente e fácil de usar, é ideal para laboratórios dentários que buscam desempenho, economia de tempo e confiabilidade nos processos de queima.



### VITA VACUMAT® 6000 MP

#### Forno Multifuncional Premium para Cerâmica Dentária

Forno multifuncional Premium para queima e injeção de cerâmica dentária, com alta precisão de temperatura ( $\pm 1^\circ\text{C}$ ) e controle digital via VITA vPad. Compacto, moderno e eficiente, garante resultados precisos, operação segura e versatilidade para diversos tipos de cerâmica dentária.

**VITA**

## RESINAS 3D BEGO



### VARSEO SMILE CROWN® PLUS

Resina 3D híbrida fotopolimerizável reforçada com cerâmica, indicada para a confecção de coroas permanentes unitárias, inlays, onlays e facetas por impressão 3D.

Oferece alta resistência à flexão ( $\approx 116$  MPa), excelente estabilidade dimensional e de cor, além de acabamento estético natural com polimento duradouro. Possui baixa absorção de água, alta biocompatibilidade e ótima resistência ao desgaste, garantindo desempenho clínico confiável e aparência natural em restaurações definitivas.

Compatível com impressoras de 385 nm e 405 nm.

#### Indicações:

Coroas unitárias permanentes, inlays, onlays e facetas.

#### Apresentação Comercial:

Frascos de 250 g e 500 g, disponíveis em 7 tonalidades VITA® A1, A2, A3, B1, B3, C2 e D3.



### VARSEOSMILE® TRINIQ

Resina 3D híbrida fotopolimerizável reforçada com cerâmica, indicada para restaurações permanentes e temporárias. Oferece alta resistência ( $\geq 120$  MPa), excelente estabilidade mecânica, polimento duradouro, estética natural e biocompatibilidade.

Compatível com impressoras de 385 nm e 405 nm.

#### Indicações:

Coroas unitárias, pontes (permanentes até 3 e temporárias até 7 elementos), inlays, onlays, facetas e dentes protéticos.

#### Apresentação Comercial:

Frascos de 250 g e 500 g, em 10 tonalidades VITA® – A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, D3, 0M1 e 0M3.

## RESINAS PARA IMPRESSÃO 3D



### RESILAB 3D PREMIUM MODELO: CORES SKIN, GRAY, WHITE E YELLOW

A Resilab 3D Premium modelo é perfeita para criar modelos da boca do paciente para executar o trabalho de restauração ou prótese. A resina cria modelos altamente resistentes em 3 cores: Skin (pele), Gray (cinza), White (branco) ou Yellow (amarelo). Disponível em embalagens de 1Kg.



### RESILAB 3D CLEAR: PARA PLACAS E GUIAS

Resina de material translúcido e com ótima resistência. É indicada para confecção de placas para bruxismo e placas mio-relaxantes. Disponível em embalagens de **250g e 500g**.



### RESILAB 3D GENGIVA: PARA SIMULAÇÃO DE GENGIVA

Resina flexível com coloração rosa é indicada para fazer a simulação da gengiva em modelos de prótese dentária. Não deve ser utilizada em contato com a boca. Disponível em embalagens de **250g e 500g**.



### RESILAB 3D CAST PREMIUM: PARA FUNDIÇÃO E INJEÇÃO

A Resilab 3D Cast pode ser usada para fundição de ligas metálicas e injeção de cerâmica. Devido à sua alta dissolução e resistência traz melhores resultados e fidelidade na fundição. Disponível em embalagens de **500g**.



### RESILAB 3D CAST WAX: RESINA CALCINÁVEL COM CARGA DE CERA

Resina calcinável na cor azul com carga de cera para injeção. A cera permite maior fluidez para transição em cerâmica injetável. Sua composição confere às impressões uma textura suave e superfície lisa. Quando queimadas, não deixam resíduos, criando PPR ou dentes em metal altamente fiéis. Disponível em embalagens de **250g e 500g**.



### RESILAB 3D TEMPORÁRIA NA CORES 0M2(BL2)/A1/A2/A3/B1: PARA RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS

Resina para impressão 3D de coroas, inlays, onlays e facetas provisórias. A resina é biocompatível e aprovada pela ANVISA. Disponível em embalagens de **250g e 500g**.

# RESILAB 3D

## SCANNER SMILE 2



**SMILE 2**

O Smile 2 é um scanner intraoral moderno, desenvolvido para proporcionar digitalizações rápidas, precisas e seguras. Equipado com inteligência artificial, esterilização UV automática e conexão Tipo C, oferece praticidade e confiabilidade no dia a dia clínico.

Com apenas 200 g, o Smile 2 é leve, ergonômico e confortável de operar, garantindo uma experiência mais agradável para o profissional e o paciente. Sua alta precisão de 15 µm e velocidade de captura de 40 quadros por segundo permitem gerar modelos 3D detalhados em poucos minutos.

O sistema conta ainda com pontas antiembaçantes, análise automática de tecidos moles, recursos de medição, oclusão e simulação ortodôntica, além de integração com sistemas EXO.

### Tecnologia Inteligente

**IA avançada:** identifica tecidos moles e adapta-se a reflexos e manchas.

**Análise e medição precisas:** oclusão, undercut e linha de margem.

**Simulação ortodôntica** e modelos 3D realistas  
Integração total com sistemas EXO.

## ÓCULOS DE REALIDADE VIRTUAL PARA ODONTOLOGIA



O Smart View Glasses (SVG) é um óculos de realidade virtual inteligente, desenvolvido para levar a odontologia digital a um novo patamar de inovação e eficiência. Ele permite ao profissional visualizar e controlar o escaneamento em tempo real diretamente pelas lentes, sem precisar olhar para o computador.

Com conexão Wi-Fi e integração total com sistemas CAD, o SVG garante mais agilidade, precisão e conforto durante os procedimentos clínicos. Seu design leve, ergonômico e ajustável pode ser usado sobre óculos de grau, proporcionando liberdade de movimento e postura correta.

Equipado com display Si-OLED Full HD (1920×1080), campo de visão de 34°, processador Qualcomm XR1, 4 GB de RAM e bateria de até 6 horas, o SVG oferece imagens nítidas e desempenho rápido. É compatível com os Scanners do mercado.

O Smart View Glasses combina tecnologia, conforto e precisão, transformando o modo como o profissional interage com o universo da odontologia digital.

**SVG** SMART  
VIEW  
GLASSES



## TECNOLOGIA DE PRECISÃO PARA PROFILAXIA ODONTOLÓGICA



### PT-A

**Equipamento 3 em 1 que combina ultrassom e jato de pó para limpeza profunda e tratamento periodontal.**

Equipamento 3 em 1 que combina ultrassom e jato de pó, oferecendo limpeza profunda e tratamento periodontal com máxima eficiência e conforto. Ideal para todas as etapas de profilaxia, com operação contínua, pedal multifuncional e compatibilidade com diferentes tipos de pó.



### AP-A

**Equipamento de polimento a ar para remoção de placa, pigmentos e manutenção de implantes.**

Equipamento compacto para polimento a ar, remoção de placa e pigmentações. Proporciona resultados rápidos e suaves com design ergonômico, reservatório removível e sistema otimizado de pressão. Ideal para manutenção de implantes e higiene preventiva.

# AIRJET

PROFILAXIS

## PÓS PARA DIFERENTES NECESSIDADES CLÍNICAS



### FAST

À base de Bicarbonato de Sódio **65µm**

**300g / garrafa**

Usado para remoção de pigmentos persistentes, sujeira macia e biofilme na gengiva adulta.

Disponível nos sabores: **limão, pêssego e morango.**



### GENTLE

À base de Glicina **65µm**

**200g / garrafa**

Indicado para remoção de biofilme e sujeira mole na gengiva adulta.

Ideal para pacientes sensíveis, ortodônticos, de retorno ou que optam por raspagem indolor.

Proporciona tratamento suave, confortável e seguro.



### GENTLE MINI

À base de Glicina **25µm**

**120g / garrafa**

Suave e não invasiva, ideal para manutenção de dentes pediátricos, ortodontia, restaurações, periodontia e implantes.

Pode ser usada em tecidos moles sem causar danos.



### SUPER

À base de Eritritol **14µm**

**120g / garrafa**

Fácil remoção de biofilme e pigmento preso à superfície do esmalte, dentina, tecido mole, restauração, aparelho ortodôntico ou implante.



### SUPER PRO

À base de Eritritol **65µm**

**200g / garrafa**

Indicado para remoção de biofilme, pigmento e sujeira mole na região supragengival adulta. Proporciona um tratamento mais confortável aliado à raspagem eficiente.


PROFILAXIS  
**POWDER**




## AS PONTEIRAS MAIS USADAS E VENDIDAS

**Modelo: G4**Potência recomendada: **Modo G 2~5**


Para limpeza de espaços supragengivais e interdentais

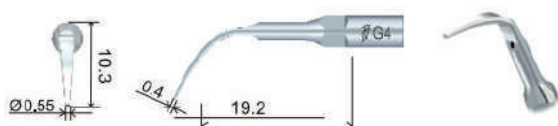**Modelo: G1**Potência recomendada: **"Modo G 3~7 (Modo P 2~6)"**

Remoção completa do cálculo supragengival

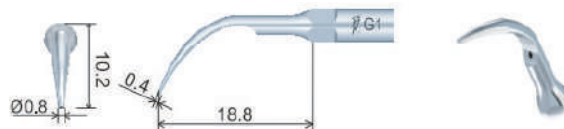**Modelo: P1**Potência recomendada: **Modo P 2~6**

A ponta da agulha é fina e é usada para remover cálculos subgengivais, limpar espaços supragengivais e interdentais

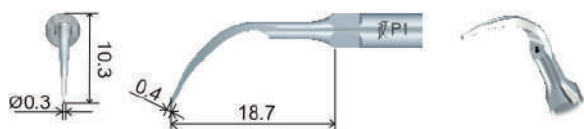**Modelo: P8**Potência recomendada: **Modo P 2~6**

A ponta da agulha é plana e larga e pode ser usada para limpar a superfície do dente e acima da gengiva, no quarto abaixo da gengiva.

**Modelo: P9**Potência recomendada: **Modo P 2~6**

Usado para remover o cálculo profundamente na bolsa periodontal e enxaguar a parte profunda da bolsa periodontal

**Modelo: P33**Potência recomendada: **Modo P 2~6**

Usado para remover o cálculo profundamente na bolsa periodontal e enxaguar a bolsa periodontal

**Modelo: P56 (Liga de titânio)**Potência recomendada: **Modo P 2~6**

remover cálculos subgengivais, limpar espaços supragengivais e interdentais.



Used for gingival large calculus and dental plaque

**Modelo: P59 (Liga de titânio)**Potência recomendada: **Modo P 2~6**

remover cálculos subgengivais, limpar espaços supragengivais e interdentais



Used for subgingival calculus probing, subgingival scaling and root planing

**Modelo: P50L (Liga de titânio)**Potência recomendada: **Modo P 2~6**

remover cálculos subgengivais, limpar espaços supragengivais e interdentais.



Used for explore subgingival calculus, root planing and subgingival scaling

**Modelo: P50R (Liga de titânio)**Potência recomendada: **Modo P 2~6**

remover cálculos subgengivais, limpar espaços supragengivais e interdentais.




Used for explore subgingival calculus, root planing and subgingival scaling

**AIRJET**  
PROFILAXIS

**Modelo: P3**

Potência recomendada: "Modo P 2~6 (Modo G 2~5)"

Usado para remover o cálculo profundo da bolsa periodontal e enxaguar a parte profunda da bolsa periodontal.

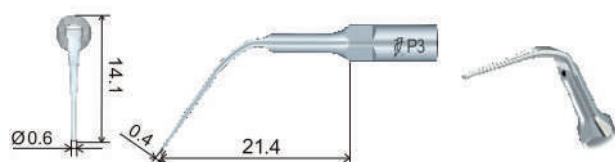
**Modelo: P90**


Potência recomendada: "Modo P 1~6 (Ótimo 3~5)"

Manutenção de Implantes.


**Modelo: E60**

Potência recomendada: "Modo E 1~5 (Ótimo 3~5)"

Limpeza de canal radicular

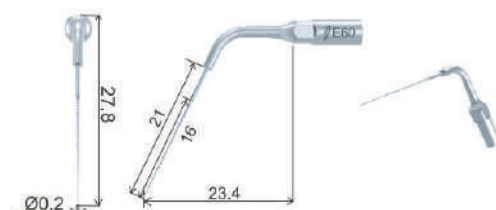
**Modelo: E62**

Potência recomendada: "Modo E 1~5 (Ótimo 3~5)"

Limpeza de canal radicular


**Modelo: E66**

Potência recomendada: "Modo E 1~5 (Ótimo 3~5)"

E66/ED66

Used for root canal irrigation


**Modelo: P94**


Potência recomendada: "Modo P 1~6 (Ótimo 3~5)"

Manutenção de Implantes.


**Modelo: P95**

Potência recomendada: "Modo P 1~6 (Ótimo 3~5)"

Manutenção de Implantes.

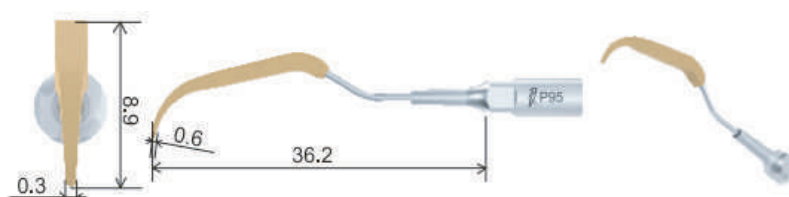

# AIRJET

PROFILAXIS

---

# WILCOS

— DESDE 1938 —



/wilcos\_



/wilcosacademy



/wilcosdobrasil



55 24 3064-1000



[www.wilcos.com.br](http://www.wilcos.com.br)